

Serie DX1


2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1000-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1000-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1000-04/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

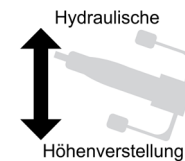

Modell 1000-00/H
in Grundausstattung;
Polsterfarbe: 64-713 corn



Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Modell 1000-00/H mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen (040N), Seitensicherungen (1008), Entfall Nasenschlitz (1615-EF);
Polsterfarbe: 64-716 black



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 470 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010F / 015F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 550 mm x B 380 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm