

Vscan AirTM SL

Sektor- und Linear-Schallkopf in einer Sonde.

Mehr sehen. Schneller behandeln.



Freiheit und Flexibilität

Das Vscan Air SL setzt neue Maßstäbe im Bereich der tragbaren Ultraschallgeräte mit einer flexiblen, kabellosen Sektor- und Linear-Dualsonde für kristallklare Ultraschallbilder, jederzeit und überall einsatzbereit. Das extrem kompakte Ultraschallgerät wurde für Ihre speziellen Anforderungen entwickelt und ist immer dabei – kabellos, anpassbar und intuitiv. Das Vscan Air ist klein und leicht und damit auch Ihr stetiger Begleiter bei jedem Patienten.



Direkte Einblicke im Taschenformat

Beschleunigen Sie Diagnose- und Behandlungsentscheidungen mit dem Vscan Air SL für schnelle Herz- und Gefäßuntersuchungen. Mit Hilfe der Vscan Air App kann das Vscan Air SL sowohl mit Android™- als auch mit iOS™-Mobilgeräten verbunden werden.

2-in-1 Leistung

Die Dualsonde des Vscan Air SL ermöglicht Untersuchungen von oberflächennahen und tieferliegenden Strukturen bei gleichbleibender Bildqualität.

Für Sie entwickelt!

Integrieren Sie das Vscan Air Ultraschallsystem optimal in Ihren klinischen Alltag. Unsere ultra-portablen Geräte können einfach und intuitiv bedient werden.

Garantierte Langlebigkeit

Das Gerät ist wasserdicht, durch eine dreijährige Garantie abgesichert, nach militärischen Normen sturzgeprüft und für die Flugrettung oder Einsatzfahrzeuge zugelassen. Wir unterstützen Sie auch mit zuverlässigem Service vor Ort sowie Online-Schulungen.

Entwickelt für Sie. Entwickelt für Ihre Anforderungen.



Nehmen Sie das Vscan Air SL überallhin mit hin* – dank kabelloser Freiheit und maximaler Portabilität. Die Sektor-Sonde ist ideal für eine schnelle Befundung des Herzens. Die gegenüberliegende Sondenseite des Vscan Air SL ist linear angeordnet, sodass beim Wechsel von der kardialen zur vaskulären Untersuchung wirklich nichts unentdeckt bleibt. Sie müssen Ihr Ultraschallgerät nicht mehr suchen – es passt in Ihre Kitteltasche.



Das anwenderzentrierte und intuitive Design ermöglicht einfache Vorgänge, auch dank der Wisch-/Tippsteuerung und einer einfachen Benutzeroberfläche.



Flexibles Arbeiten dank kabelloser Geräteanbindung und Datenfreigabe für Ihren DICOM®-Netzwerkserver oder freigegebene Ordner. Ihre Bilderserie kann nach der Untersuchung übertragen werden.



Mit nur wenigen Klicks können Sie Ultraschallbilder oder -bildserien anonymisiert aus der Vscan Air App heraus an installierte Apps auf Ihrem Device, weiterleiten.



Sowohl die Elektronik als auch die Sonde des Geräts werden kontinuierlich überwacht, um eine ordnungsgemäße Funktion auch nach einem Sturz sicherzustellen.



Dank Smart-Connect, bei der die Sonde während des Ladevorgangs mit dem Anzeigegerät verbunden bleibt, kann mit der Untersuchung sofort begonnen werden.



Gynäkologische Anwendungen, wie fetale Größe, Fruchtwasser und geschätztes fetales Gewicht können bestimmt bzw. untersucht und mit Anmerkungen versehen werden.



Die erstklassige Cybersicherheit bietet eine Zwei-Punkt-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten und die Ihrer Patienten.



Intuitive Mess-Tools für rasche Messungen direkt am Ort des Geschehens.



Versehen Sie Bilder direkt auf der Anzeige mit Anmerkungen und optimieren Sie damit Ihren Arbeitsablauf.



Entwickelt wurde das Gerät für sowohl Einsteiger als auch Experten zur Durchführung standardmäßiger sowie fortgeschrittener Ultraschalluntersuchungen.



B-Mode



Farbdoppler



PW-Doppler



M-Mode



* Das Gerät ist für einen limitierten Einsatz außerhalb professioneller medizinischer Einrichtungen freigegeben. Der Einsatz ist auf die, in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Umgebungsbedingungen, beschränkt. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an einen Verkaufsberater von GE Healthcare.

Sichere Behandlungen dank SignalMax + XDclear


Kardiale Bildqualität, auf die Sie sich verlassen können.

Wir als GE HealthCare erweitern die Grenzen der Bildqualität bei Ultraschalluntersuchungen mit unseren patentierten Technologien wie SignalMax™ oder XDclear™. Wir setzen neue Maßstäbe für tragbare Ultraschallgeräte und bieten eine außergewöhnliche Bildqualität mit einer an die Sektor-Sonde angepassten XDclear-Technologie. Dazu wurde die hohe Signalintensität von SignalMax™ mit der branchenführenden Monokristall-Sondentechnologie kombiniert. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Eindringtiefe, Auflösung und Sensitivität bei der Bildgebung.


Das Vscan Air SL beinhaltet dank seiner Dualsonde sowohl einen Sektor- als auch einen Linear-Schallkopf in einem Gerät.

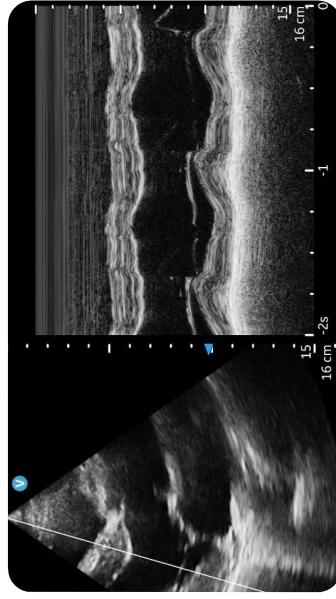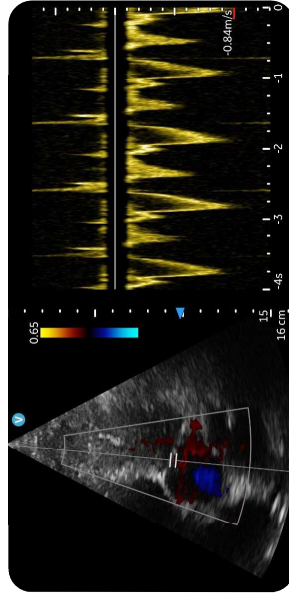

Kardialer PW-Doppler (oben); M-Mode (unten)

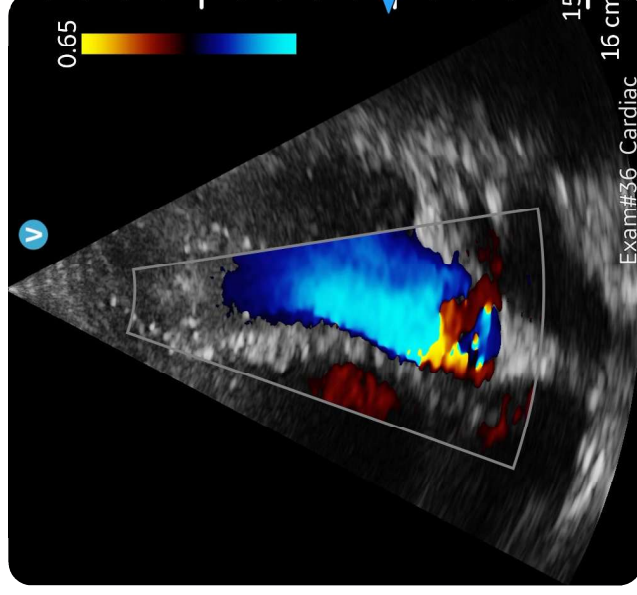

Apikale Fünft-Kammer-Ansicht mit Color Flow

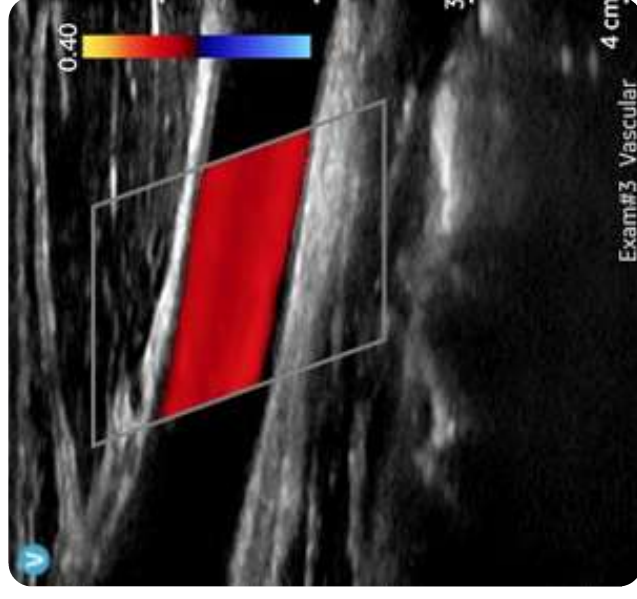

Arteria carotis communis mit Color Flow

Holen Sie das Beste aus Ihrem Vscan Air heraus

Leistungsstarke Bildgebung. Leistungsstarke Verbindung. Zwei Abo-Optionen.

Mit einem optionalen Abonnement stehen Ihnen eine Reihe digitaler Tools zur Verfügung, die für eine optimale Nutzung Ihres Vscan Air + Digitale Tools sorgen. Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe durch eine sichere Zusammenarbeit und Bildmanagementlösungen.



Unsere individuellen Lösungen umfassen:



MyImageCloud[†]

Cloud-Speicher für Verwaltung, Freigabe und Fernzugriff auf Bilddaten und Untersuchungen von jedem Ort aus.



MyRemoteShare^{*}

Einfache und sichere Echtzeitverbindung dank Audio-, Video- und Bildschirmfreigabe.

Fleet Solutions ermöglicht den Zugriff auf:



MyDeviceHub

Verwaltung und Steuerung Ihrer gesamten Vscan Air-Geräte aus der Ferne.



MyRemoteShare

Einfache und sichere Echtzeitverbindung mit Kollegen und Referenten dank Audio-, Video- und Bildschirmfreigabe.

^{*} MyRemoteShare ist nicht für den diagnostischen Einsatz vorgesehen.

[†] Centricity™ Universal Viewer Zero Footprint und Centricity Enterprise Archive werden unterstützt.

Die Daten von EU-Kunden werden in Frankfurt, Deutschland, gespeichert.
Die digitalen Tools sind in Ihrem Land entsprechend der örtlichen Vorschriften und Genehmigungsverfahren möglicherweise nicht verfügbar.

Entwickelt von GE HealthCare, inspiriert von Ihren Anforderungen

Als Pionier in Sachen Ultraschallinnovationen hat GE HealthCare mit dem Vscan ein Ultraschallgerät im Taschenformat entwickelt, das auf unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken auf der ganzen Welt beruht.

Auch diese kleinen Ultraschallgeräte sind mit den von GE HealthCare bekannten und renommierten Innovationen ausgestattet.

Wir sind an Ihrer Seite.

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg – vom ersten Ultraschall bis zur sicheren Anwendung. Holen Sie das Beste aus Ihrem System heraus – von der einfach zu bedienenden Sonde und der intuitiven App, bis hin zu den renommierten Service- und Schulungstools von GE HealthCare. Das Vscan Air wird mit einer dreijährigen Sorglos-Garantie geliefert.

© 2023 GE HealthCare.

SignalMax, Vscan Air und XDeclar sind Marken von GE HealthCare. GE ist eine Marke der General Electric Company, die im Rahmen einer Markenlizenz verwendet wird. DICOM ist eine eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association. Android ist eine Marke von Google LLC. iOS ist eine Marke von Cisco.

Die Verfügbarkeit der medizinischen Systeme von GE HealthCare hängt von den lokalen Anforderungen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region ab. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE HealthCare. Nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

JB00330DCH



GE HealthCare