

Serie 2000XL

2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2000-00XL/H und 2001-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2000-03XL/H und 2001-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2000-04XL/H und 2001-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2805-..XL/H entspricht Modell 2000-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz

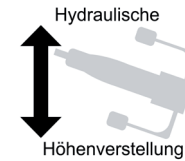

Beide Abb.:
Modell 2000-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1180N),
Papierrollenhalter (1270K),
Schiebegriff (1810),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-722 orange

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Trittkebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2000-..XL/H: 700 mm | 2001-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

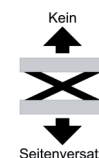

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das
Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 70 mm