

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6070-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6070-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6870-..E entspricht Modell 6070-..E

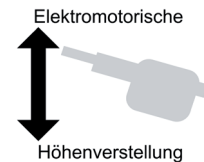

Alle Abb.:
Modell 6070-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt
(1048), Fußschalter anstelle
von Handschalter;
Polsterfarbe 64-715 anthracite

Grundausstattung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis +50° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 2.040 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

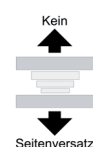

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

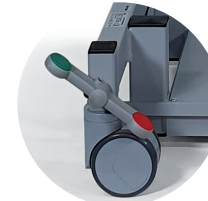

Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen




Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen

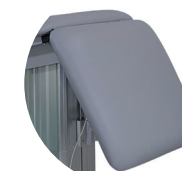

Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 01.2025_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.