

Serie 6000E



2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6000-03E und 6001-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6000-04E und 6001-04E grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6805-..E entspricht Modell 6000-..E, jedoch mit Nasenschlitz

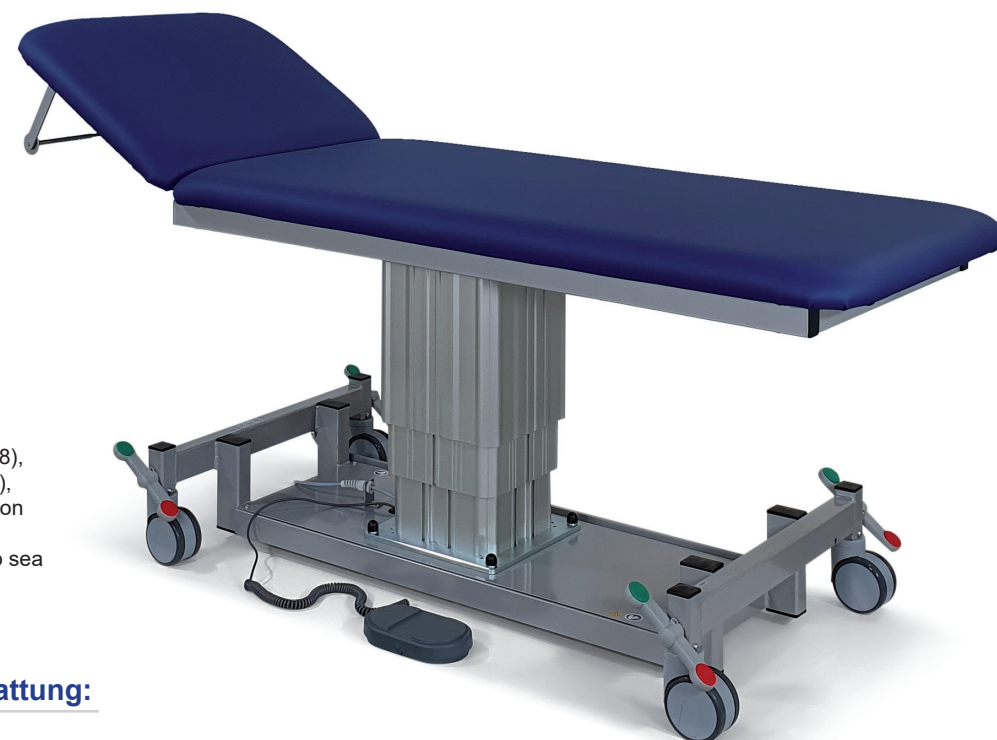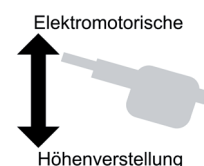

Beide Abb.:
Modell 6000-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1048),
Papierrollenhalter (1270K),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteilänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteilänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 6000-..E: 700 mm | Modell 6001-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet


kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

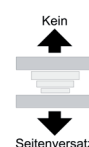

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweiskörper Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflege, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 01.2025_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.