

Serie 2000XL

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2000-00XLE und 2001-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2000-03XLE und 2001-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2000-04XLE und 2001-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2805-..XLE entspricht Modell 2000-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz

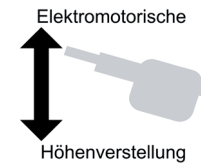

Modell 2000-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1180N),
Papierrollenhalter (1270K),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-702 white



Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2000-04XLE mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (1045N), umlaufende Fußbedienung
(1960E), Nasenschlitz und Füllpolster (1610, 1620)



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2000-..XLE: 700 mm | Modell 2001-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 280 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

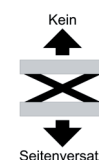

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die
Gegenrichtung

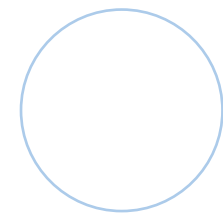

Art.-Nr. 1940-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1960E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das
Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung


Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere **elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen** konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:


Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem **Doppeltipp**

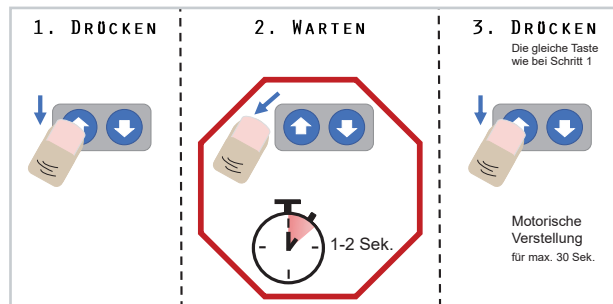

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

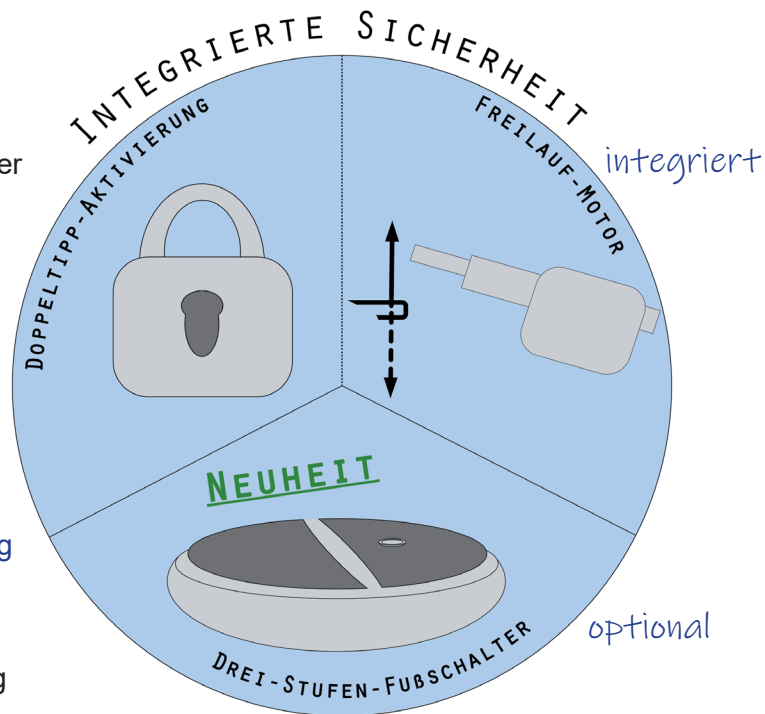

Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses




OPTIONAL



Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine **dritte Stufe** aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.

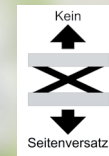

Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausstattung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD



Grundausstattung

bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handschalter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Ausstattungs Optionen:




Drei-Stufen-Fußschalter:

Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung



Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

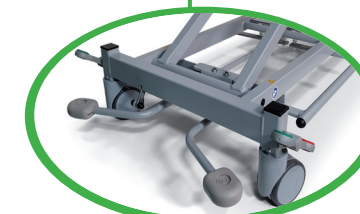

Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.